

**Miele**

# DATA DIARY

La tracciabilità dei processi diventa senza fili

**Miele Professional. Immer Besser.**



Semplice, economico, sicuro.

## Svizzera

### Miele SA

Limmatstrasse 4

8957 Spreitenbach

Telefon +41 56 417 27 51

Telefax +41 56 417 24 69

professional@miele.ch


www.miele.ch/professional

Seguici su LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

## La tracciabilità dei processi è molto semplice:

Per una completa tracciabilità dei processi relativi al trattamento degli strumenti, Miele Professional offre da subito una speciale soluzione Plug & Play tramite app che vi farà risparmiare molto tempo. La app riceve i dati del processo automaticamente dalle macchine per il lavaggio e la disinfezione PG 8581, PG 8582, PG 8583, PG 8591, PG 8592, PG 8593, PG 8582 CD e PG 8583 CD e consente la creazione di protocolli tramite app su tablet, ossia senza cavi, penna USB o altre fasi intermedie.

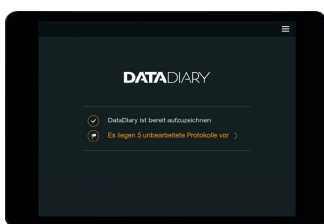


### Massima praticità

Con DataDiary Miele offre la possibilità di tracciare i processi tramite un'app intuitiva con interfaccia utente moderna. È una soluzione Plug & Play: basta collegarsi per essere operativi.




### Sicuro e senza cavi

Il trasferimento dati avviene senza cavi e in modo sicuro tramite WLAN codificata (WPA2) tra la macchina Miele e un tablet. La connessione WLAN è semplice da impostare con SSID (Service Set Identifier) e password.

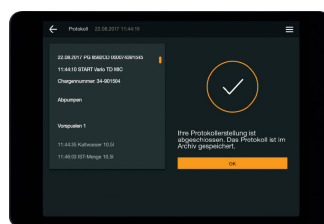

### Protocollo in PDF

Il corretto trattamento degli strumenti deve essere completamente tracciato. A tale scopo, DataDiary offre una dettagliata creazione di protocolli in formato PDF.

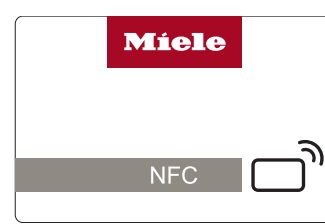

### Autenticazione rapida

L'autenticazione dell'utente avviene senza problemi tramite tag NFC o User ID e password.



### Ulteriori informazioni utili

Sul nostro sito trovate i link per il download e un video esplicativo dettagliato.

## Pacchetti di prodotti

### DataDiary

- Modulo di comunicazione WLAN XKM 3100 W CDS
  - 5 schede chip NFC
  - Istruzioni di installazione e d'uso
- N. mat. 10689630/N. art. 68.8190.01

### DataDiaryID

- 5 schede chip NFC
- N. mat. 10735270/N. art. 68.8195.01